




PICO[◇] 7
Pikaopas

smith-nephew.com/pico

 **smith&nephew**
PICO[◇] 7


Single Use Negative Pressure
Wound Therapy System

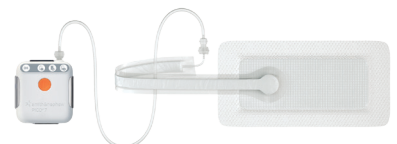

Supporting healthcare professionals

PICO[◇] 7

Uudenlaista teknologiaa

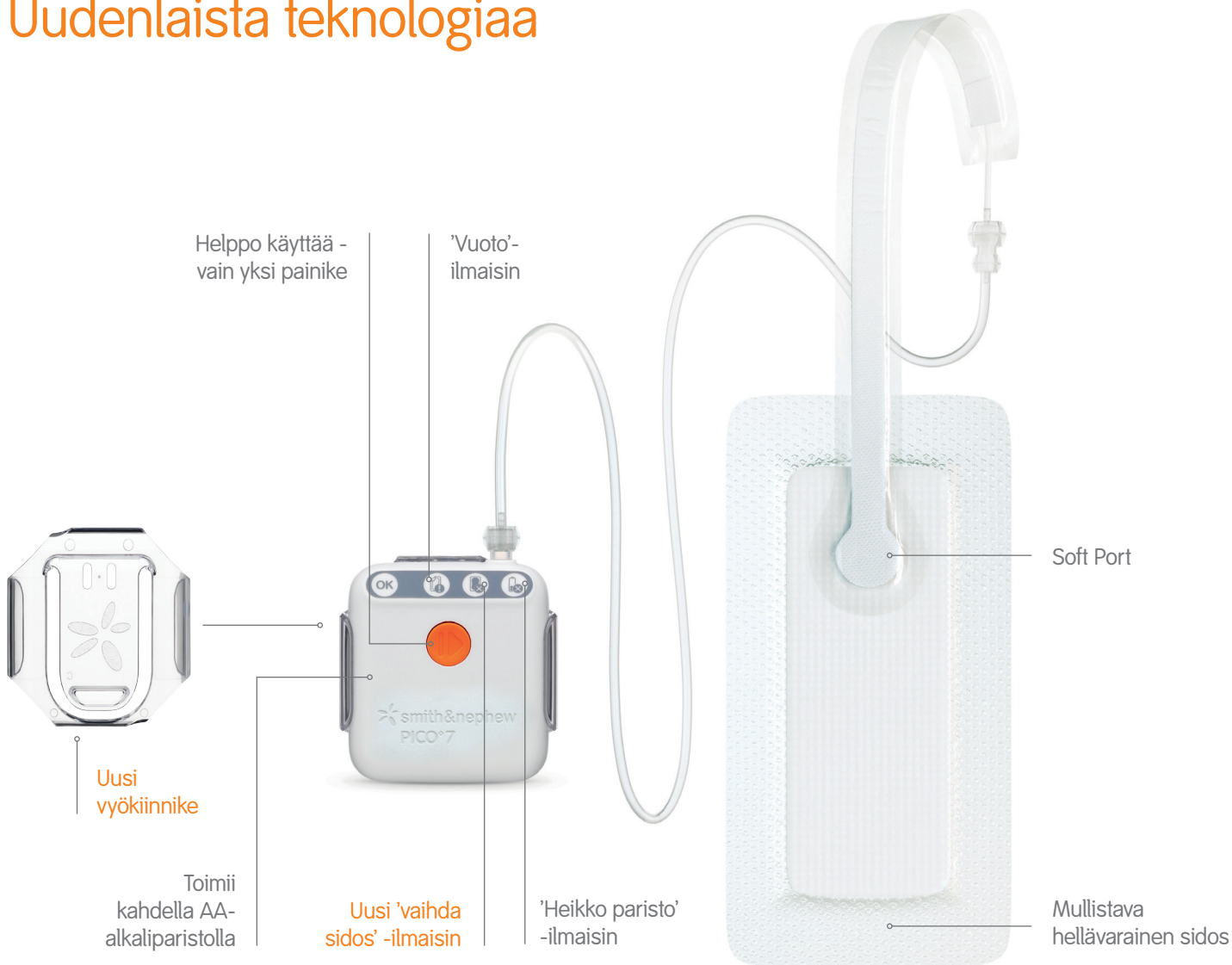

Paras suunnittelemamme PICO

Suorituskykyinen

PICO-pumppu on edeltäjänsä kaksi kertaa tehokkaampi käsittelemään ilmapuotoja.¹ Huomattavasti parantuneesta tehosta voi olla terveydenhuollon ammattilaisille hyötyä alipaineimuhoidon yhteydessä varsinkin hoidettaessa hankalia ja vaikeasti tiivistettäviä alueita.

Mukautuva

Saatavilla on nyt myös viiden sidoksen monipakkaukset, joilla hoidon voi suunnitella potilaan kliinisten tarpeiden mukaiseksi.

Helppokäyttöinen











- Uudessa käyttöliittymässä on 'vaihda sidos' -ilmaisain, joka helpottaa sidoksen oikea-aikaista vaihtoa.
- Terveydenhuollon käytäntöjen noudattamista helpottava alue, johon voi kirjoittaa hoidon aloituspäivän.

Potilaan elämänlaatua parantava

- Järjestelmä on entistä hiljaisempi²
- Uusi vyökiinnike parantaa kannettavuutta³

Tila ja vianetsintä

hälytykset ja viat

Näytön tila	Ilmaisimen tila	Mahdollinen syy	Tietoja/vianetsintä
	Kaikki ilmaisimet ovat sammuneet	Pumppu on valmiustilassa	Alipaineimuhoido on tauotettu. Jatka alipaineimuhoidoa painamalla oranssia painiketta.
	Vihreä 'OK'-ilmaisim vilkkuu	Pumpun alipaineimuhoido-jakso on valmistunut	Oranssin painikkeen painaminen ei jatka alipaineimuhoidoa. Jos alipaineimuhoidoa on jatkettava, terveydenhuollon ammattilaisen on vaihdettava pumppu ja sidos uusiin.
	Vihreä 'OK'-ilmaisim ja oranssi 'vuoto'-ilmaisim vilkkuvat	Paristot ovat tyhjentyneet	Jos pumpun alipaineimuhoidojakso ei ole vielä valmistunut, vaihda paristot.
	Vihreä 'OK'-ilmaisim ja oranssi 'heikko paristo'-ilmaisim vilkkuvat	Järjestelmä toimii normaalisti. Ei ongelmia.	Pumpun käyntiääni voi toisinaan kuulua, kun pumppu pitää yllä alipainetta. Tämä on normaalia.
	Vihreä OK-ilmaisim ja oranssi 'heikko paristo'-ilmaisim vilkkuvat	Pumppu on toiminnassa, mutta ei ole vielä saavuttanut haluttua alipainetasoa	Odota enintään 65 sekuntia. Arvioi, onko alipaineimuhoido käynnissä.
	Oranssi 'vuoto'-ilmaisim vilkkuu	Järjestelmä toimii normaalisti, mutta paristot ovat vähissä	Vaihda paristot ja jatka hoitoa painamalla oranssia painiketta.
	Oranssi 'vuoto'-ilmaisim ja oranssi 'heikko paristo'-ilmaisim vilkkuvat	Laite on havainnut merkittävän ilmavuodon. Alipaineimuhoido ei ole käynnissä. (Huom.: pumppu yrittää jatkaa alipaineimuhoidoa tunnin kuluttua)	Poista rypyt tasoittamalla sidos ja kiinnitysliuskat. Jatka alipaineimuhoidoa painamalla oranssia painiketta. Jos ilmavuoto ei poistu, oranssi vuotoilmaisim alkaa vilkkua noin 60 sekunnin kuluttua. Varmista, että letkun liittimet on kierretty kiinni tiukasti.
	Oranssi 'vaihda sidos'-ilmaisim vilkkuu	Laite on havainnut merkittävän ilmavuodon, ja paristot ovat vähissä. Alipaineimuhoido ei ole käynnissä. (Huom.: pumppu yrittää jatkaa alipaineimuhoidoa tunnin kuluttua)	Korjaa ilmavuoto edellä olevien ohjeiden mukaisesti. Vaihda myös paristot ja jatka hoitoa painamalla oranssia painiketta.
	Oranssi 'vaihda sidos'-ilmaisim ja oranssi 'heikko paristo'-ilmaisim vilkkuvat	Sidos on täynnä tai suodatin on tukossa. Alipaineimuhoido ei ole käynnissä. (Huom.: pumppu yrittää jatkaa alipaineimuhoidoa tunnin kuluttua)	Terveydenhuollon ammattilaisen on vaihdettava sidos uuteen ja jatkettava alipaineimuhoidoa painamalla oranssia painiketta.
	Kaikki ilmaisimet palavat jatkuvasti	Sidos on täynnä tai suodatin on tukossa, ja paristot ovat vähissä. Alipaineimuhoido ei ole käynnissä. (Huom.: pumppu yrittää jatkaa alipaineimuhoidoa tunnin kuluttua)	Terveydenhuollon ammattilaisen on vaihdettava sidos uuteen. Vaihda myös paristot ja jatka hoitoa painamalla oranssia painiketta.
	Kaikki ilmaisimet palavat jatkuvasti	Pumppu on havainnut vian. Pumppu ei voi enää antaa alipaineimuhoidoa.	Terveydenhuollon ammattilaisen on vaihdettava pumppu ja sidos uusiin.


Asettaminen



1. Puhdista ja valmistelee haava paikallisen käytännön mukaisesti.

Aseta sidos

2. Irrota keskimmainen suojakalvo ja keskitä sidos haavan päälle. Portin on oltava haavaan nähden ylimpänä.

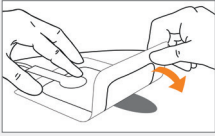

3. Poista loput kaksi liuskaa ja tasoita sidos haavan ympärille niin, ettei siihen jää ryppyjä.



Luo alipaine

4. Aseta paristot laitteeseen.
5. Kiinnitä laite sidokseen kiertämällä letkun liittimet yhteen.
6. Aloita alipaineimu painamalla oranssia painiketta. Vihreä valo alkaa vilkkua (järjestelmä toimii oikein).



Aloita hoito


7. Aseta kiinnitysluskat sidoksen jokaiselle neljälle sivulle.
8. Laitteen käyttöaika on seitsemän päivää, ja sidos voidaan pitää paikallaan enintään seitsemän päivää haavaeritteen määrän mukaan.
9. Jos haavassa käytetään täytemateriaalia, täyte ja PICO-sidos on vaihdettava 2–3 kertaa viikossa.

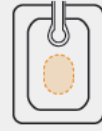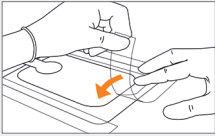

A Sidos on oikein sijoitettu, ja sen voi jättää paikalleen



B Sidos on vaihdettava - neste saattaa tukkia portin

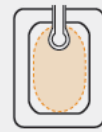

C Sidos on vaihdettava - imukykyinen alue on täynnä

Tilaustiedot

Sidoksen muoto	Sidoksen koko	2 x -sidospakkaus*	1 x -sidospakkaus**	Monipakkaukset***
	10 x 20 cm	66802002	66802012	66802022
	10 x 30 cm	66802003	66802013	66802023
	10 x 40 cm	66802004	66802014	66802024
	15 x 15 cm	66802005	66802015	66802025
	15 x 20 cm	66802006	66802016	66802026
	15 x 30 cm	66802007	66802017	66802027
	20 x 20 cm	66802008	66802018	66802028
	25 x 25 cm	66802009	66802019	66802029
	Multisite small 15 x 20 cm	66802000	66802010	66802020
	Multisite large 20 x 25 cm	66802001	66802011	66802021

Tarvikkeet

Tuotenumero

	Haavantäytemateriaali vaahto	10 x 12,5cm	66801021
	Haavantäytemateriaali harso	11 cm x 4 m	66802127

* 2 x -sidospakkaus = 2 sidosta + 1 pumppu; ** 1 x -sidospakkaus = 1 sidos + 1 pumppu; *** Monipakkaukset = vain 5 sidosta

Wound Management
Smith & Nephew Oy
Äyritie 12 C
01510 Vantaa

www.smith-nephew.com
yhteydenotto@smith-nephew.com

™Trademark of Smith & Nephew
™All trademarks acknowledged
© Smith & Nephew lokakuu 2017
18-02104-FI

Puh. 0207 866 300
Fax 0207 866 320

Supporting healthcare professionals for over 150 years

Tutustu aina ennen tuotteen käyttöä tuotteen käyttöohjeissa oleviin yksityiskohtaisiin lisätietoihin, kuten tuotteen käyttöaiheisiin, vasta-aiheisiin, vaikutuksiin, varotoimiin, varoituksiin ja tärkeisiin turvallisuustietoihin.

Viitteet

1. Data on File. DS.16.352.R Measurement of NPWT device air leak tolerance – PICO® vs PICO II. September 2016; 2. Data on File. DS.16.351.R Comparison of noise levels generated by the PICO and PICO II devices in operation. September 2016; 3. WMP.11446.UEF/R3 Project Fairbanks Human Factors Summary Report Issue 5. G Walker, May 2017.